

Medical

Precision b.v.

Comfort Marker

Aplicación sencilla de
puntos de referencia del
paciente



Aplicación sencilla de puntos de referencia del paciente

Comfort Marker

Mejore la experiencia del paciente durante su tratamiento de radioterapia y gane eficiencia clínica con Comfort Marker, desarrollado por Medical Precision B.V. Este revolucionario dispositivo de puntos de referencia aporta un nuevo nivel de confort al inicio del tratamiento de radioterapia del paciente.

El sistema, fácil de usar, está diseñado específicamente para su utilización en

radioterapia, empleando tecnología popular dentro de la industria del maquillaje permanente. El dispositivo ha sido cuidadosamente diseñado para aplicar marcas de referencia con una inyección de profundidad controlada, lo que se traduce en menos dolor para el paciente en comparación con otros métodos de marcado. Los puntos pueden desvanecerse con el tiempo o eliminarse fácilmente con una sencilla sesión de láser una vez finalizado el tratamiento del paciente.

Beneficios para el paciente

- Inyección suave y controlada del pigmento en la piel, con menor dolor para el paciente.
- Inyección del pigmento a una profundidad de 0,2-0,7 mm, en comparación con la práctica habitual de 2-3 mm
- Los puntos de referencia pueden desvanecerse con el tiempo o eliminarse fácilmente.

Beneficios clínicos

- Menor dolor mantiene al paciente relajado y más colaborador durante todo el proceso
- Módulo de aguja de seguridad rápido, limpio y desechable que minimiza el riesgo de pinchazos accidentales.
- Funcionamiento seguro y sencilla con indicación clara de los ajustes de profundidad
- Dispositivo recargado que permite su portabilidad en la sala de Tc.



Aguja de seguridad, vaso de tinta, pigmento


Información para pedidos

Comfort Marker System, 1 cant.	2010
Set de marcado del paciente - negro	4022
Incluye: Aguja de seguridad (Cant. 50), vaso de tinta (Cant. 50), pigmento negro con certificación CE (Cant. 50)	


APROBACIÓN FDA DE
NOVO
MARCADO CE

Flujo de trabajo sencillo

1. Coloque el vaso de tinta en el dispositivo.
Apriete el pigmento dentro del vaso.
2. Coloque la aguja de seguridad en el lápiz.
3. Encienda la unidad de control.
4. Elija la profundidad y absorba el pigmento (la aguja de seguridad se iluminará del mismo color que la profundidad seleccionada)
5. Coloque el punto de referencia con precisión.

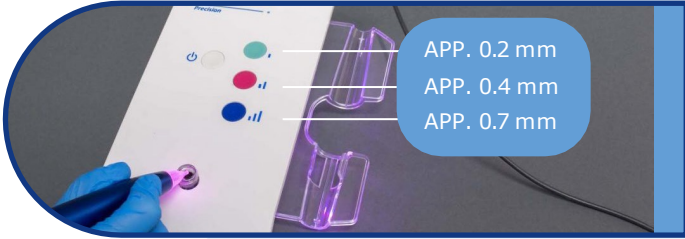

APP. 0.2 mm
APP. 0.4 mm
APP. 0.7 mm

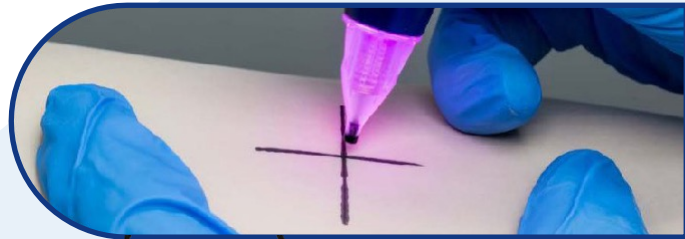

Comfort Marker
Un nuevo nivel
de confort



CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE USO PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

Medical

Precision b.v.



Fabriado por:

Medical Precision B.V.

DISTRIBUCIÓN EN EXCLUSIVA EN ESPAÑA



+34 681 105 143
López de Hoyos 42, 28006
Entrada por Edison 3*
info@de2.es
www.de2.es



Medical Precision es una empresa certificada según la norma ISO 13485.

Todos nuestros productos se desarrollan para cumplir con las normativas CE, CE-basadas y FDA.